




Optokinetik

● In der Übung verwendete Taste

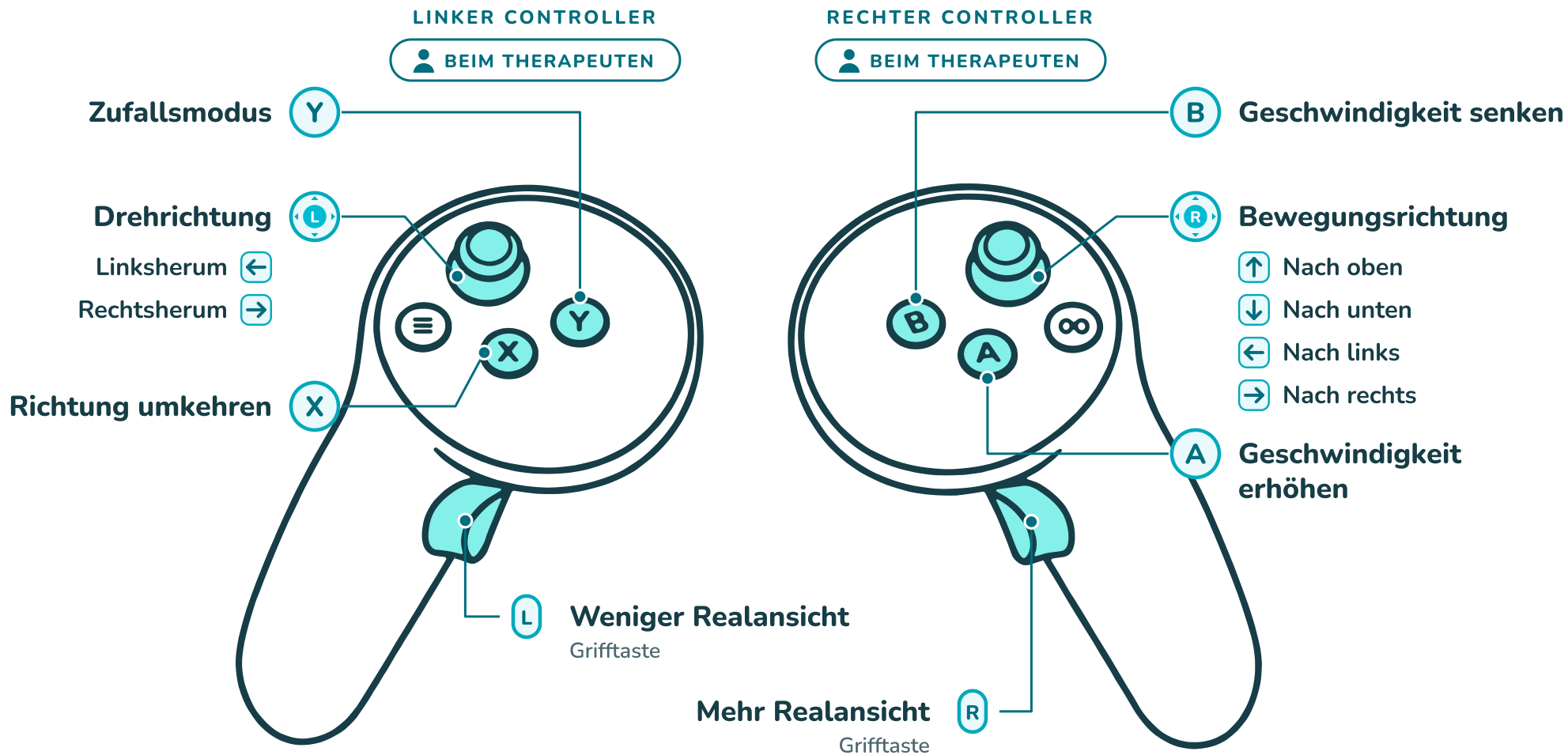

IN ALLEN ÜBUNGEN


Rechter Trigger
Kurz drücken: Pause
2 s gedrückt halten: Übung beenden





Translation

● In der Übung verwendete Taste

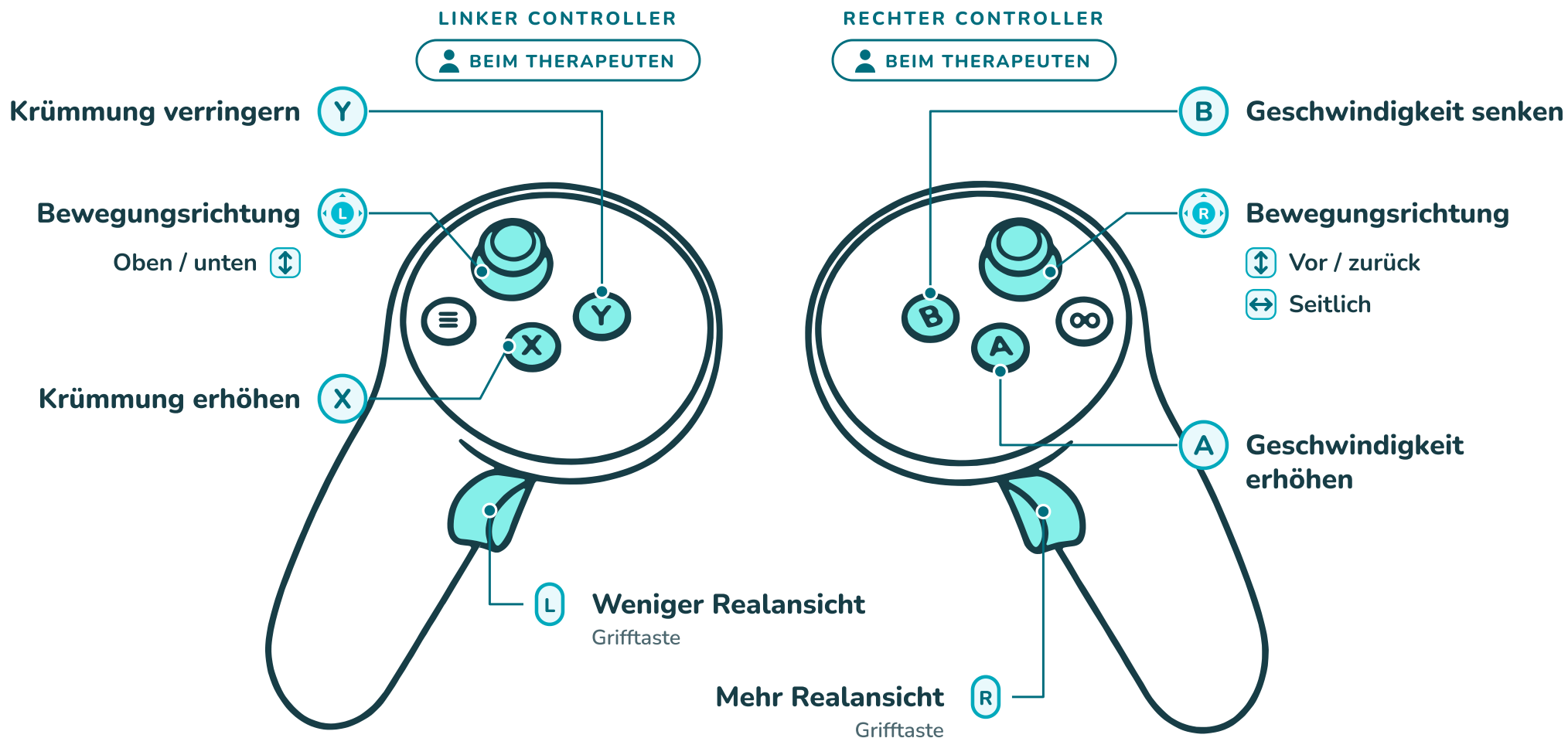

IN ALLEN ÜBUNGEN

Rechter Trigger
Kurz drücken: Pause
2 s gedrückt halten: Übung beenden





DVA — Blickstabilisierung und Blickwechsel

● In der Übung verwendete Taste
■ Controller für den Patienten


LINKER CONTROLLER

AN DEN PATIENTEN GEBEN

Öffnung des C
zeigen

Oben / unten

Links / rechts

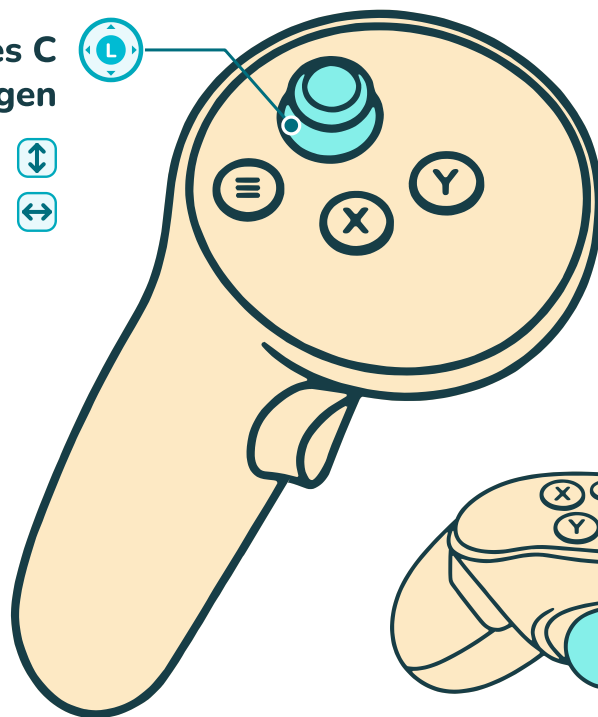


RECHTER CONTROLLER

BEIM THERAPEUTEN

B Geschwindigkeit senken

A Geschwindigkeit erhöhen

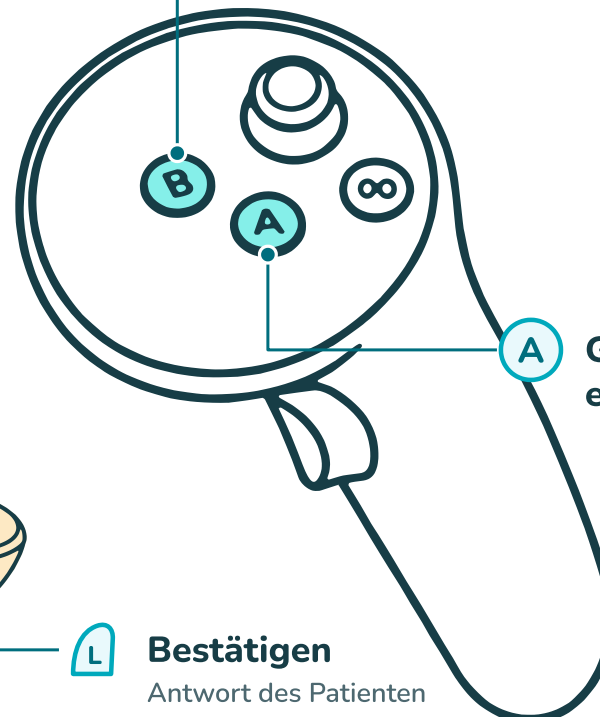

L Bestätigen
Antwort des Patienten

IN ALLEN ÜBUNGEN


Rechter Trigger

Kurz drücken: Pause

2 s gedrückt halten: Übung beenden




∞ Meta-Taste
2 s gedrückt halten: Ansicht zentrieren

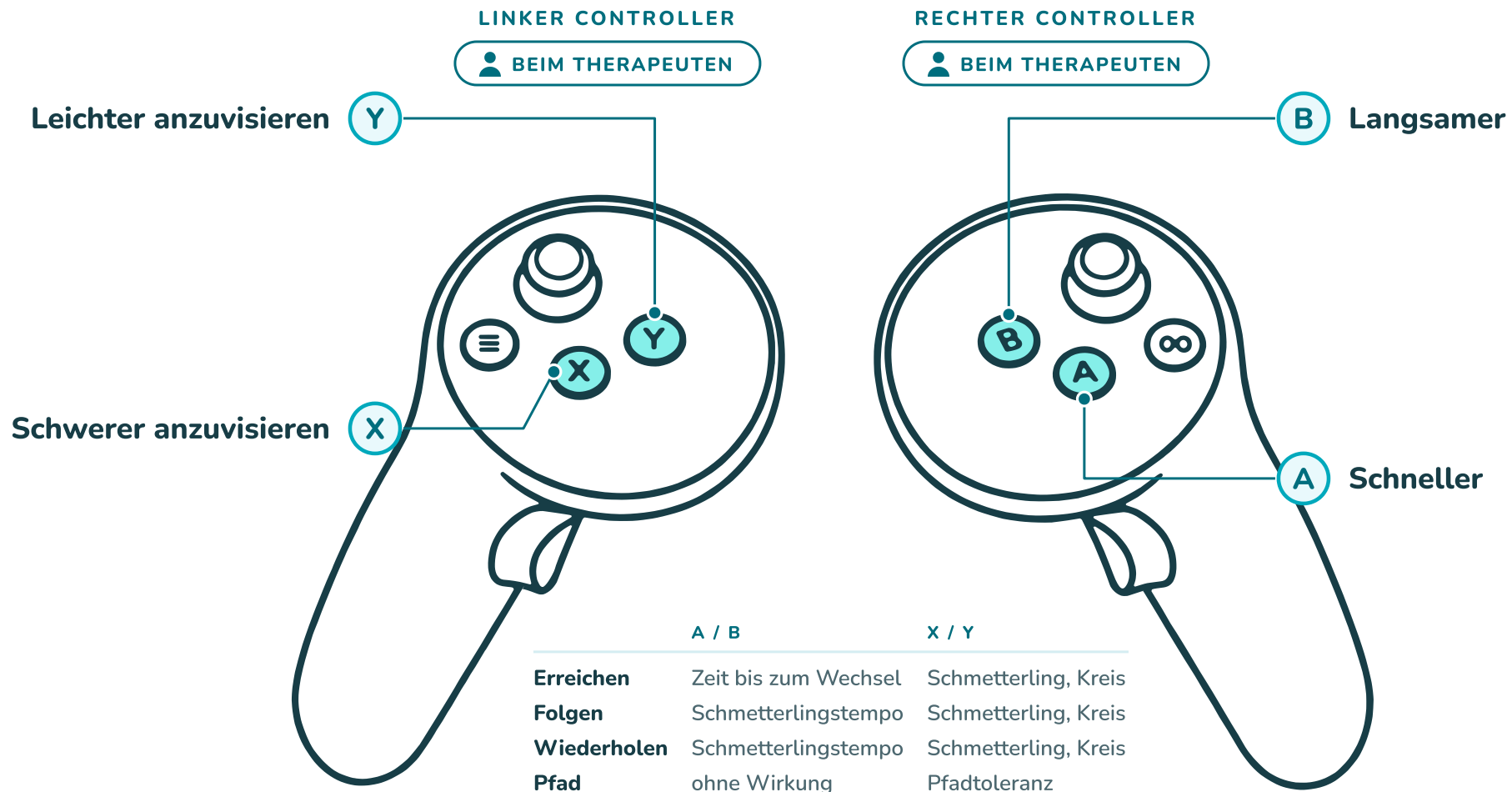

IN ALLEN ÜBUNGEN

Rechter Trigger
R
Kurz drücken: Pause
2 s gedrückt halten: Übung beenden

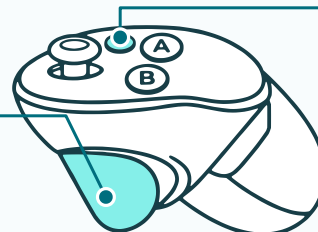R**Meta-Taste****2 s gedrückt halten:** Ansicht zentrieren



Visuelle Vertikale (SVV)

-  In der Übung verwendete Taste
-  Controller für den Patienten

LINKER CONTROLLER

 AN DEN PATIENTEN GEBEN

RECHTER CONTROLLER


 BEIM THERAPEUTEN

Balken drehen

Gedrückt halten: schneller

Linksherum 

Rechtsherum 

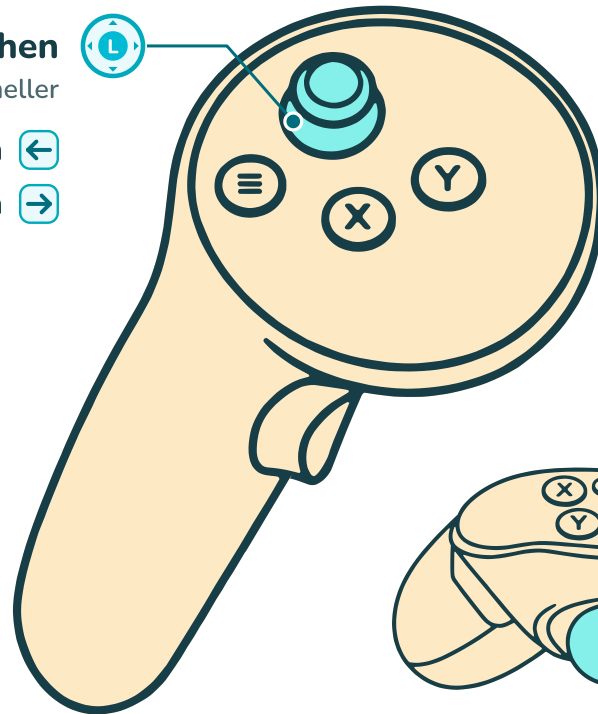

Das ist eine Messung: Im Durchgang wird nichts eingestellt. Der Therapeut nutzt nur den Trigger (unten).

Bestätigen


Der aktuelle Versuch

IN ALLEN ÜBUNGEN

Rechter Trigger

2 s gedrückt halten: Übung beenden



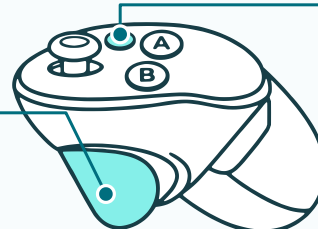

Meta-Taste

2 s gedrückt halten: Ansicht zentrieren