



Visuelle Vertikale (SVV)

-  In der Übung verwendete Taste
-  Controller für den Patienten

LINKER CONTROLLER

 AN DEN PATIENTEN GEBEN

RECHTER CONTROLLER


 BEIM THERAPEUTEN

Balken drehen

Gedrückt halten: schneller

Linksherum 

Rechtsherum 

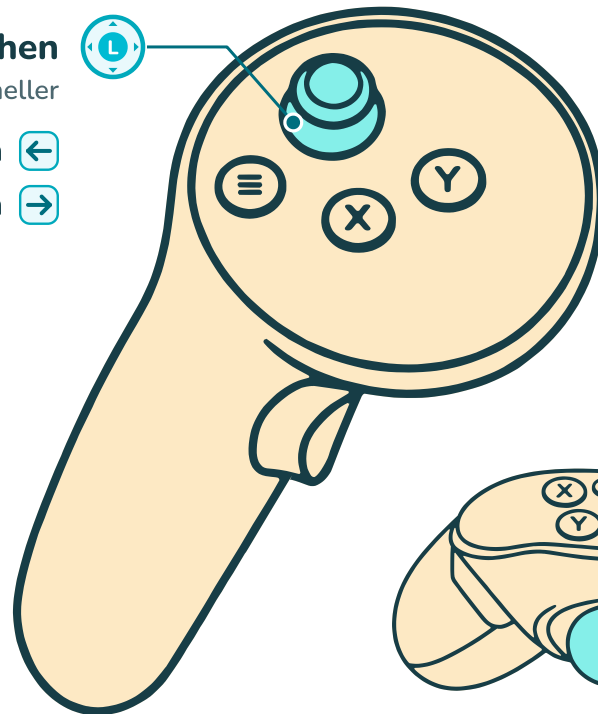

Das ist eine Messung: Im Durchgang wird nichts eingestellt. Der Therapeut nutzt nur den Trigger (unten).

Bestätigen


Der aktuelle Versuch

IN ALLEN ÜBUNGEN

Rechter Trigger

2 s gedrückt halten: Übung beenden



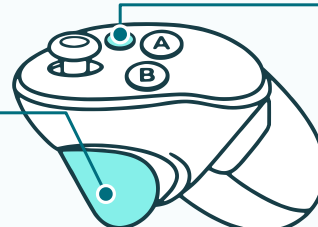

Meta-Taste

2 s gedrückt halten: Ansicht zentrieren