



AVD — estabilización y reorientación

● Botón usado durante el ejercicio
■ Mando que se entrega al paciente


MANDO IZQUIERDO

ENTREGAR AL PACIENTE

Indicar la abertura
de la C

Arriba / abajo

Izquierda / derecha

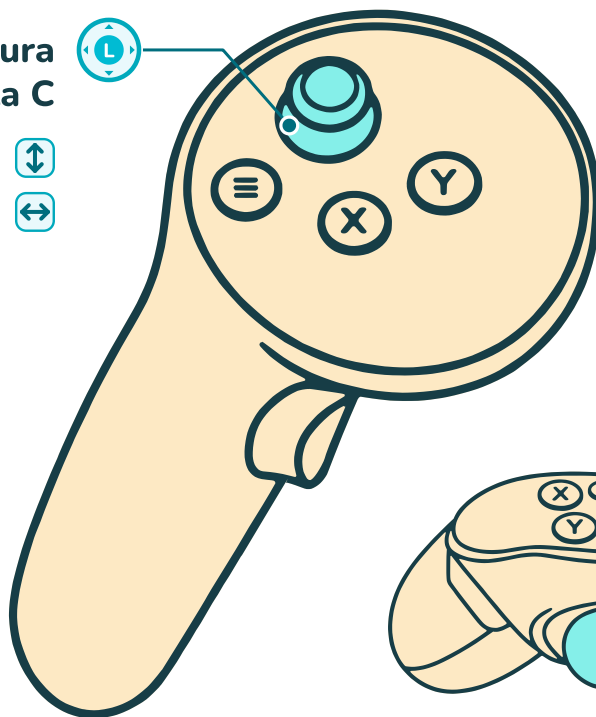


MANDO DERECHO

LO TIENE EL TERAPEUTA

B Reducir la velocidad

A Aumentar la velocidad

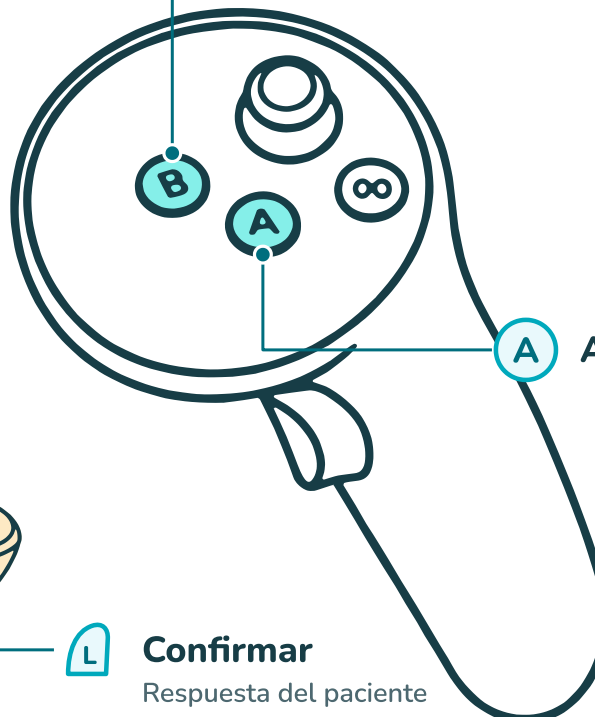

L Confirmar
Respuesta del paciente

EN TODOS LOS EJERCICIOS

Gatillo derecho

Pulsación corta: pausa

Mantener pulsado 2 s: fin del ejercicio



∞ Botón Meta
Mantener pulsado 2 s: recentrar la vista