




Optocinética

● Botón usado durante el ejercicio

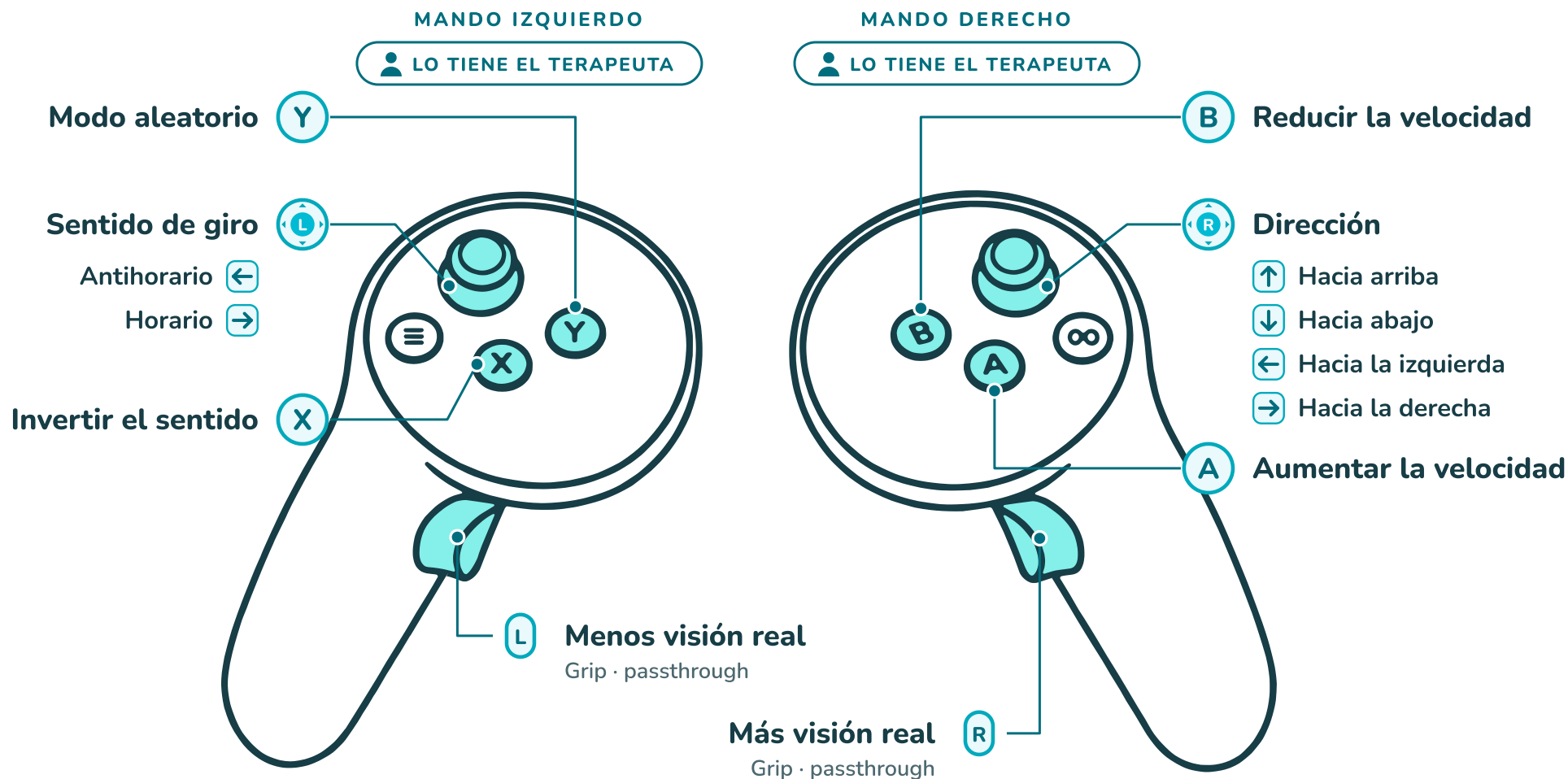

EN TODOS LOS EJERCICIOS

Gatillo derecho

Pulsación corta: pausa

Mantener pulsado 2 s: fin del ejercicio




Botón Meta

Mantener pulsado 2 s: recentrar la vista




Traslación

● Botón usado durante el ejercicio

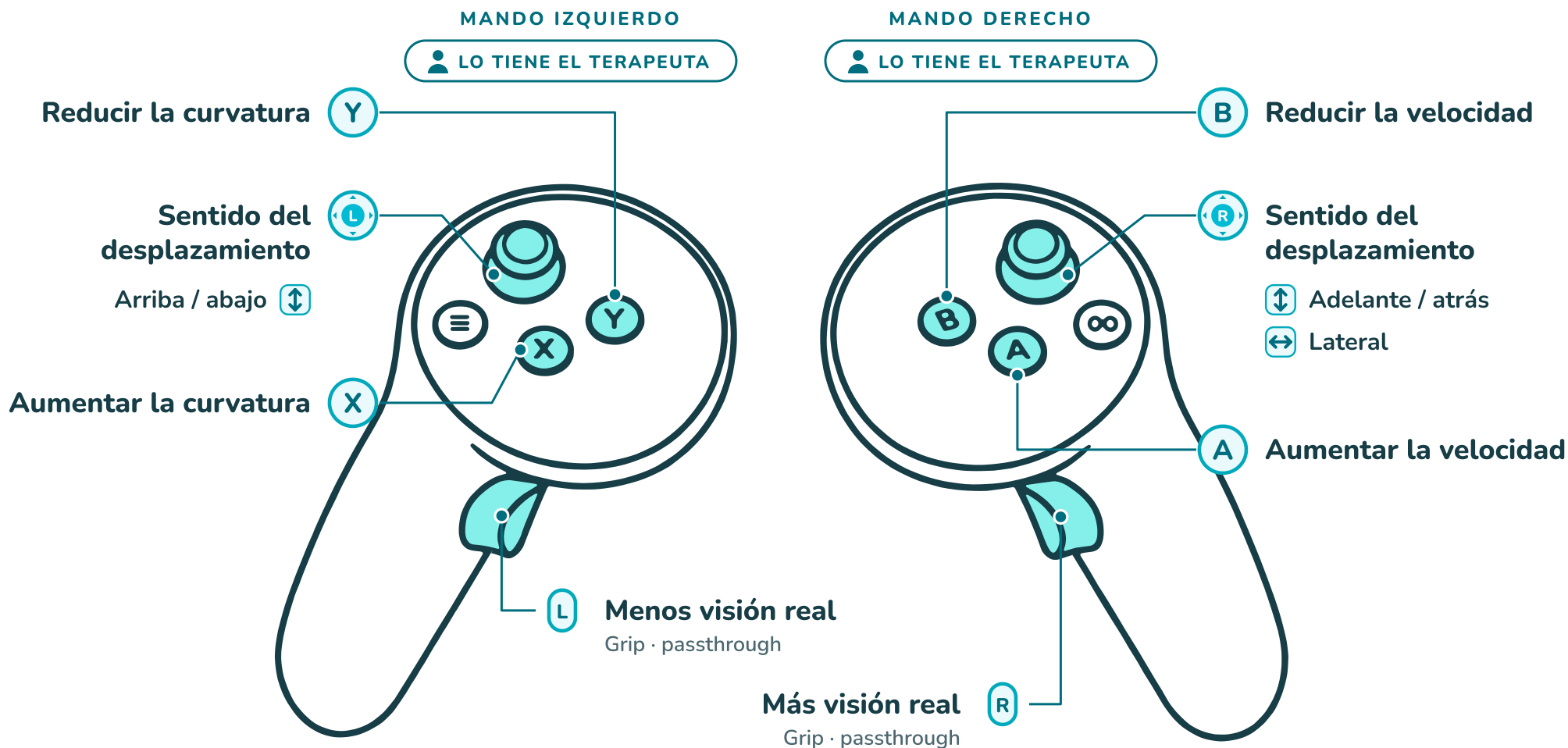

EN TODOS LOS EJERCICIOS

Gatillo derecho
Pulsación corta: pausa
Mantener pulsado 2 s: fin del ejercicio

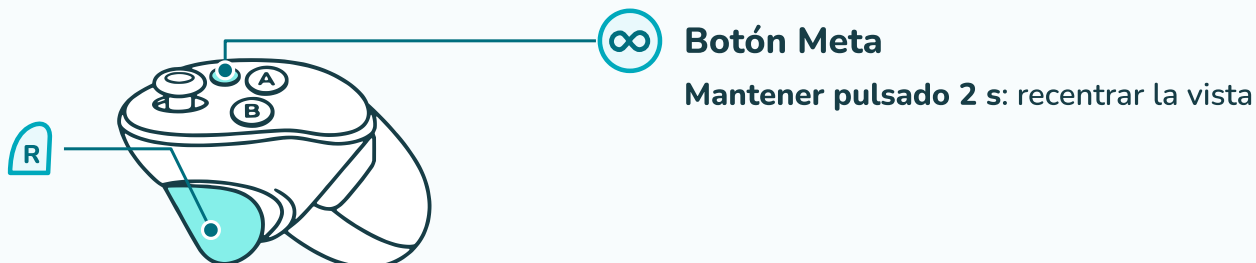



AVD — estabilización y reorientación

● Botón usado durante el ejercicio
■ Mando que se entrega al paciente


MANDO IZQUIERDO

ENTREGAR AL PACIENTE

Indicar la abertura
de la C

Arriba / abajo

Izquierda / derecha

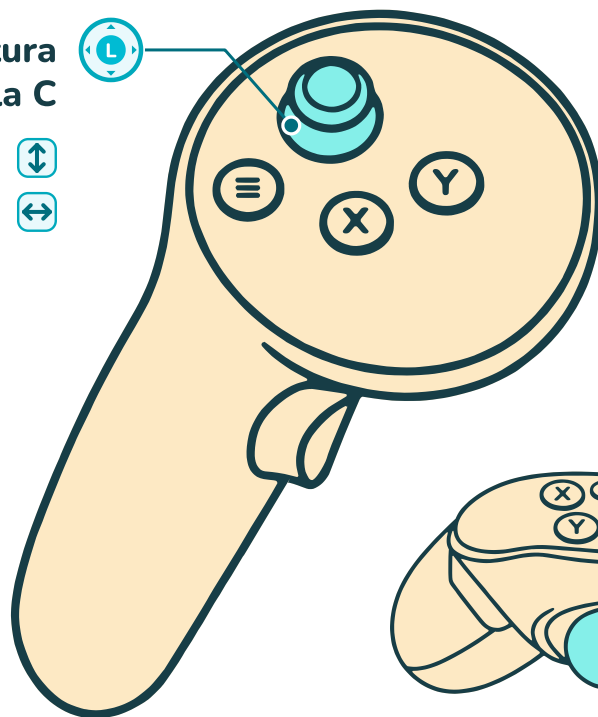


MANDO DERECHO

LO TIENE EL TERAPEUTA

B Reducir la velocidad

A Aumentar la velocidad

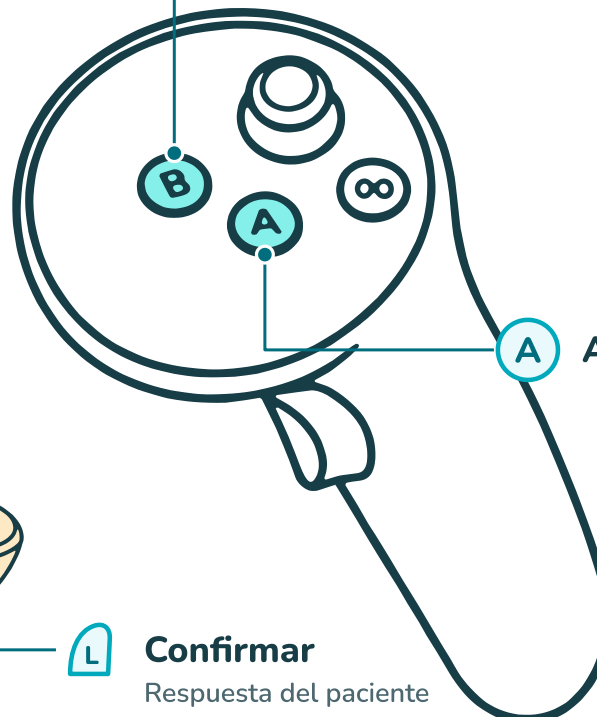

L Confirmar
Respuesta del paciente

EN TODOS LOS EJERCICIOS


Gatillo derecho

Pulsación corta: pausa

Mantener pulsado 2 s: fin del ejercicio



∞ Botón Meta
Mantener pulsado 2 s: recentrar la vista

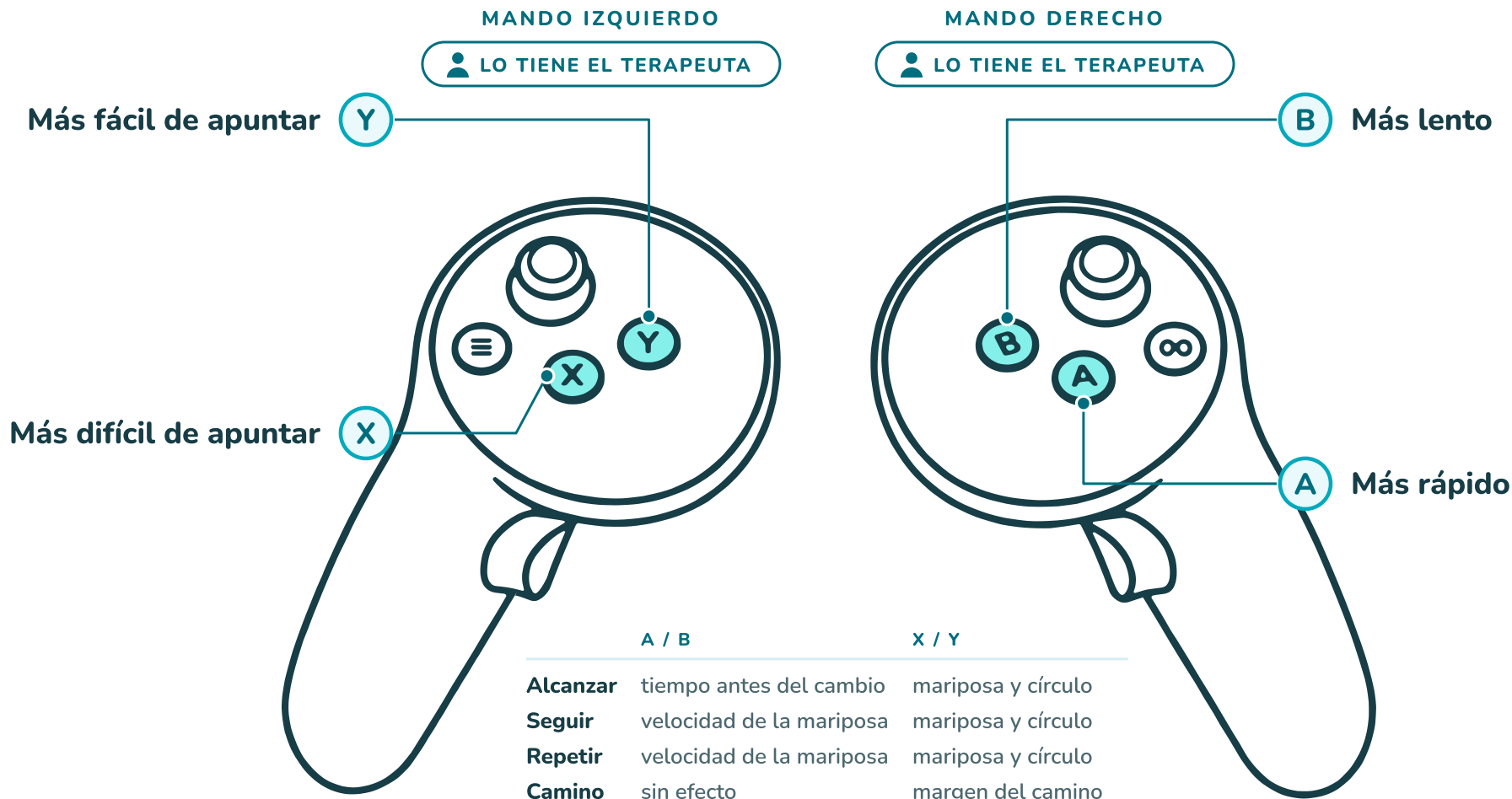


EN TODOS LOS EJERCICIOS

Gatillo derecho

Pulsación corta: pausa

Mantener pulsado 2 s: fin del ejercicio

R

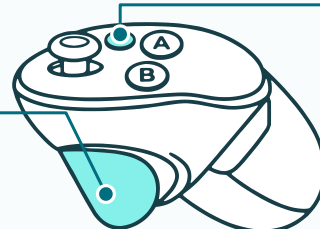

Botón Meta

Mantener pulsado 2 s: recentrar la vista



Vertical visual (VVS)

● Botón usado durante el ejercicio
■ Mando que se entrega al paciente

MANDO IZQUIERDO

ENTREGAR AL PACIENTE

MANDO DERECHO


LO TIENE EL TERAPEUTA

Girar la barra

Mantener pulsado: más rápido

Antihorario ←

Horario →

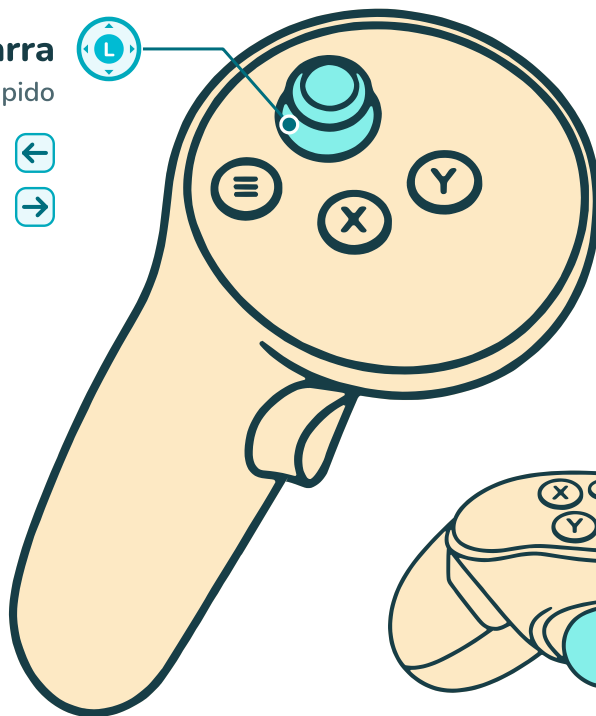

Es una medición: no se ajusta nada durante la serie. El terapeuta solo usa el gatillo (abajo).

Confirmar

El ensayo en curso

EN TODOS LOS EJERCICIOS

Gatillo derecho

Mantener pulsado 2 s: fin del ejercicio



Botón Meta

Mantener pulsado 2 s: recentrar la vista