



AVD — stabilisation et réorientation

-  Touche utilisée pendant l'exercice
-  Manette à donner au patient


MANETTE GAUCHE

 À DONNER AU PATIENT

Montrer l'ouverture
du C

Haut / bas 

Gauche / droite 

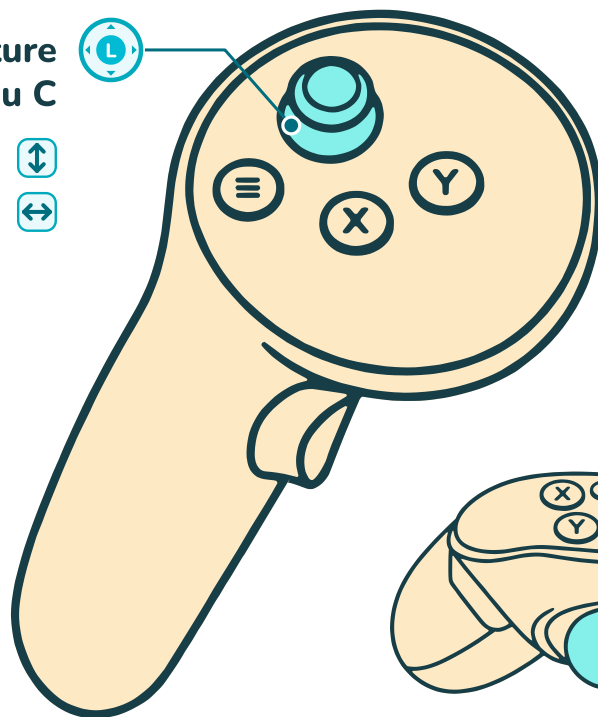


MANETTE DROITE

 TENUE PAR LE KINÉ

 **B** Diminuer la vitesse

 **A** Augmenter la vitesse

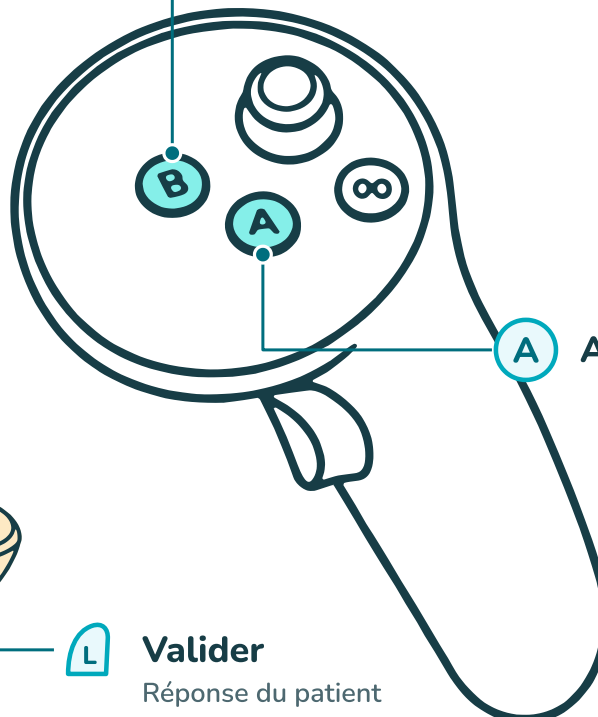

 **L** Valider
Réponse du patient

DANS TOUS LES EXERCICES

Gâchette droite

Appui court : pause

Maintenir 2 s : fin de l'exercice



 **Bouton Meta**
Maintenir 2 s : recentrer la vue