




Optocinétique

● Touche utilisée pendant l'exercice

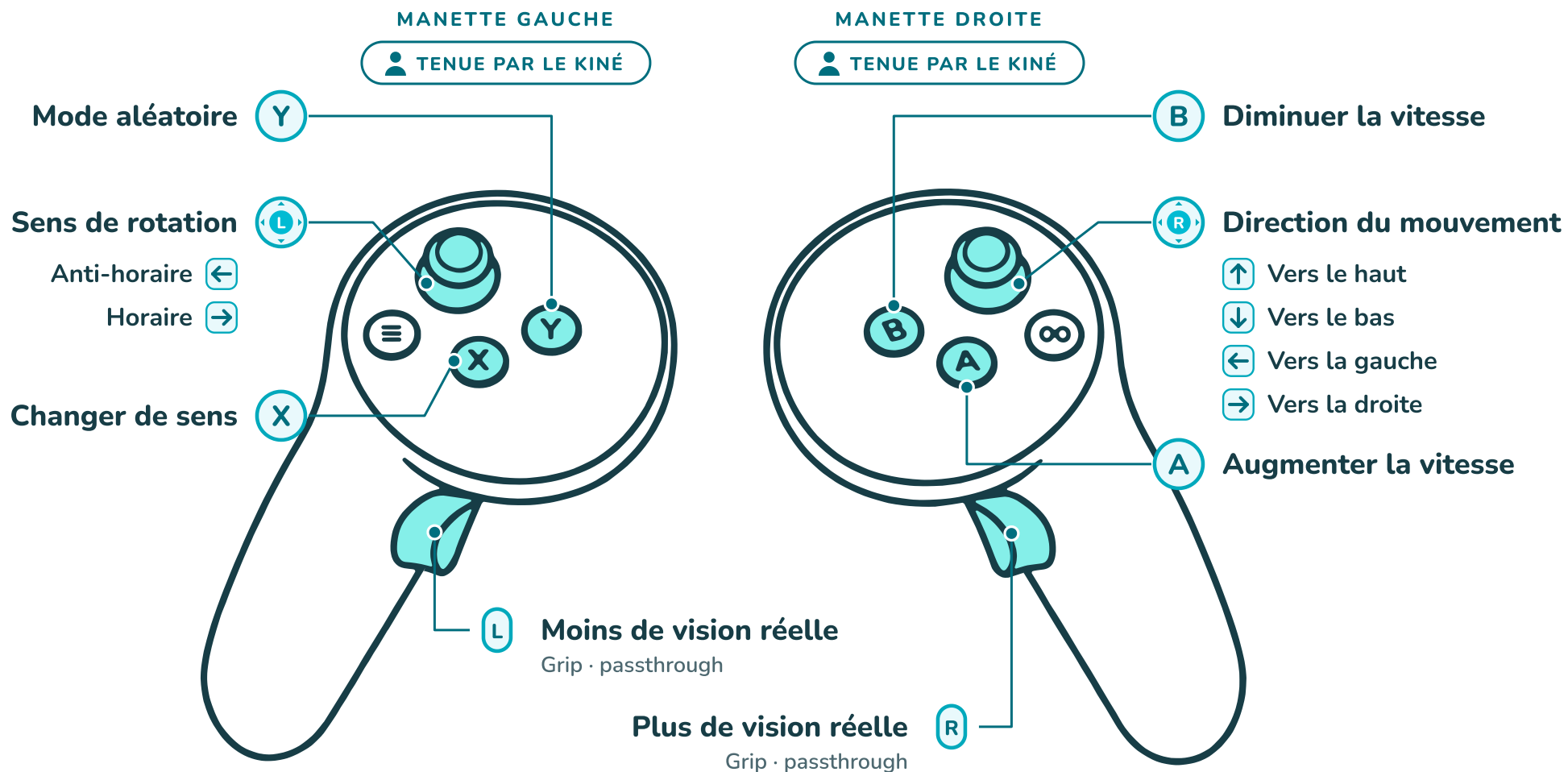

DANS TOUS LES EXERCICES


Gâchette droite
Appui court : pause
Maintenir 2 s : fin de l'exercice





Translation

● Touche utilisée pendant l'exercice

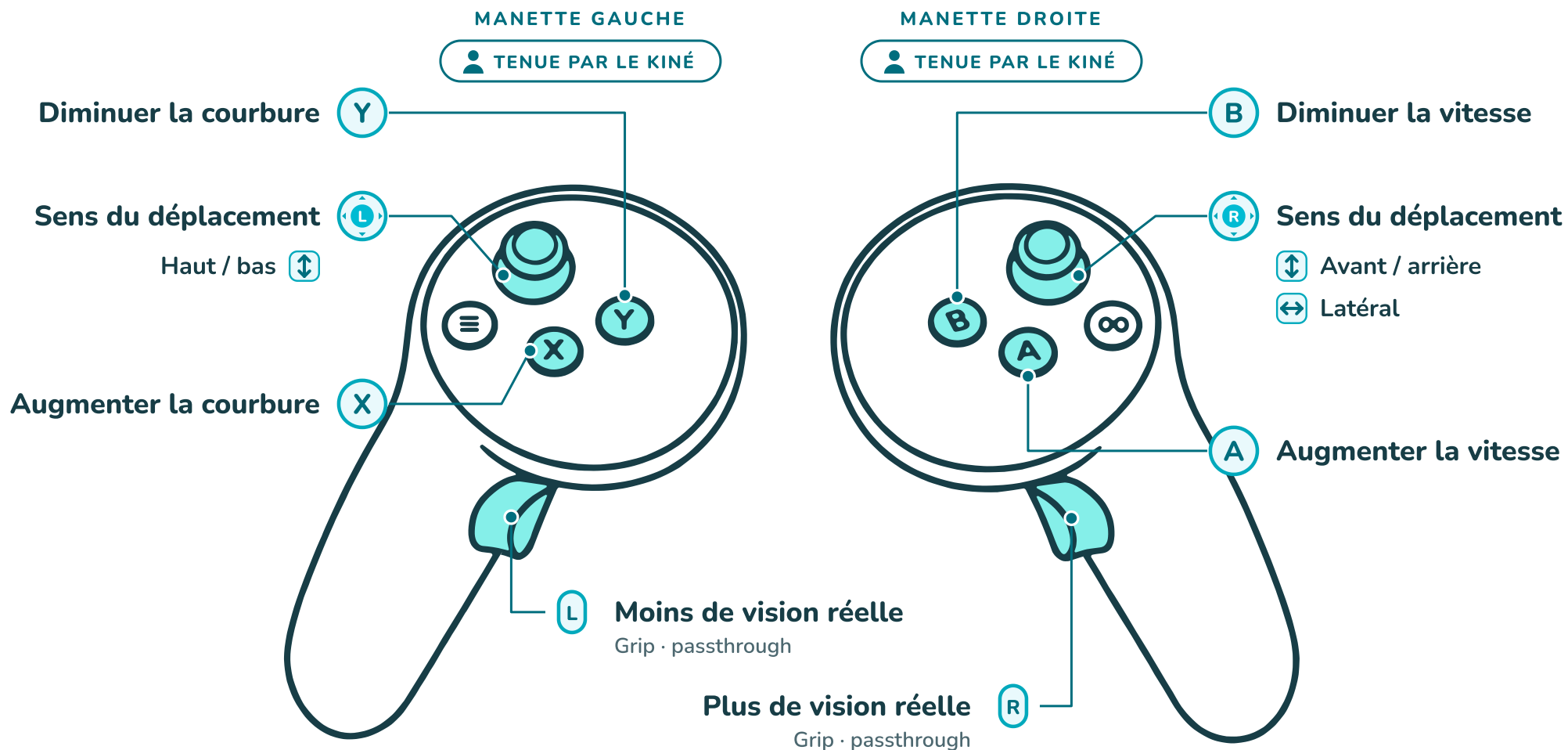

DANS TOUS LES EXERCICES

Gâchette droite
Appui court : pause
Maintenir 2 s : fin de l'exercice





AVD — stabilisation et réorientation

-  Touche utilisée pendant l'exercice
-  Manette à donner au patient


MANETTE GAUCHE

 À DONNER AU PATIENT

Montrer l'ouverture
du C

Haut / bas 

Gauche / droite 

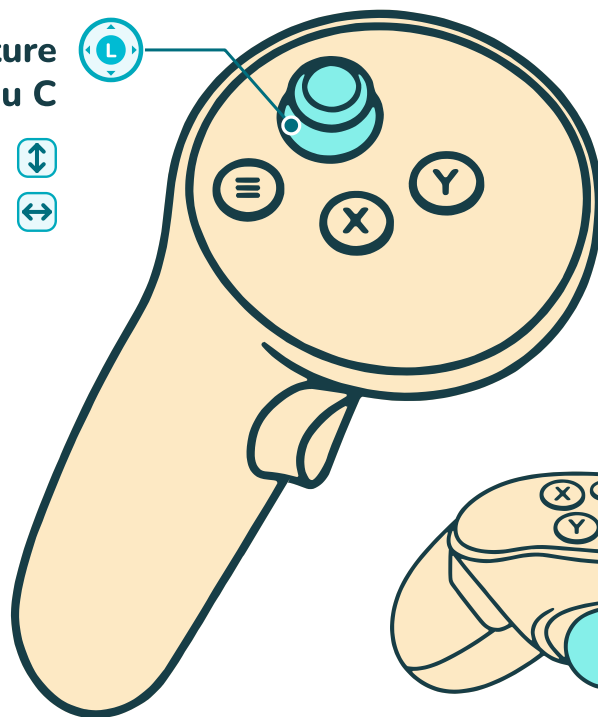


MANETTE DROITE

 TENUE PAR LE KINÉ

 **B** Diminuer la vitesse

 **A** Augmenter la vitesse

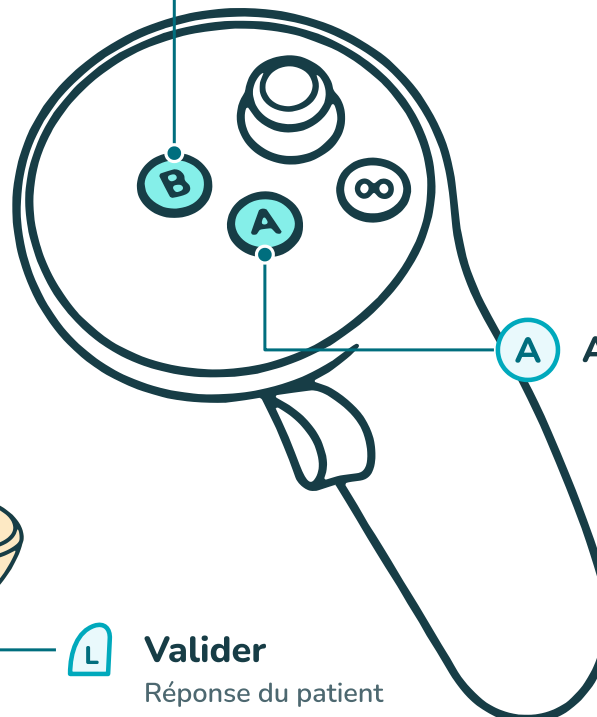

 **L** Valider
Réponse du patient

DANS TOUS LES EXERCICES


Gâchette droite

Appui court : pause

Maintenir 2 s : fin de l'exercice




 **Bouton Meta**
Maintenir 2 s : recentrer la vue

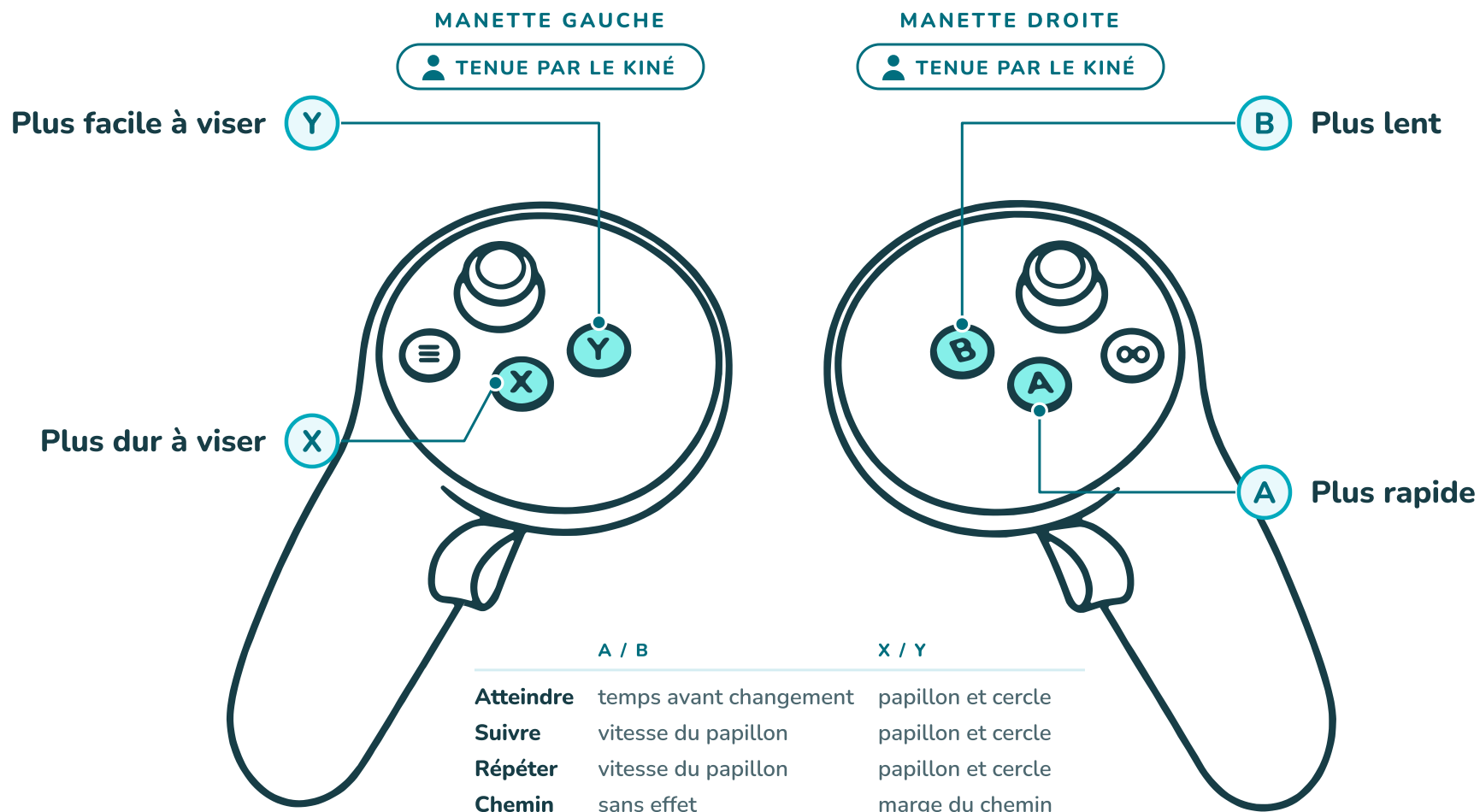

DANS TOUS LES EXERCICES

Gâchette droite
Appui court : pause
Maintenir 2 s : fin de l'exercice

R

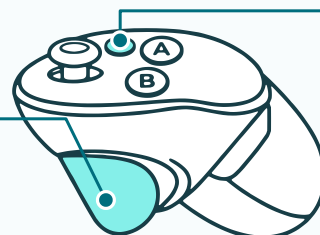

Bouton Meta

Maintenir 2 s : recentrer la vue



Verticale visuelle (VVS)

-  Touche utilisée pendant l'exercice
-  Manette à donner au patient

MANETTE GAUCHE

 À DONNER AU PATIENT

MANETTE DROITE



 TENUE PAR LE KINÉ

Tourner la barre

Maintenir : plus vite

Anti-horaire 

Horaire 

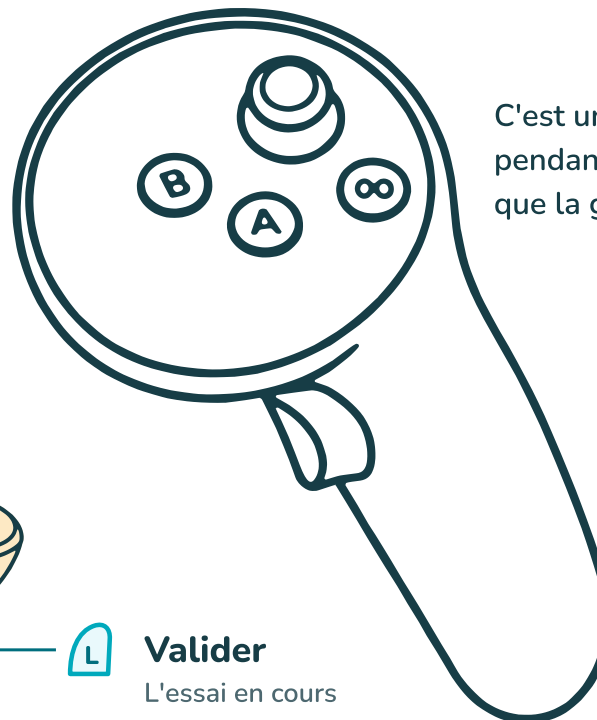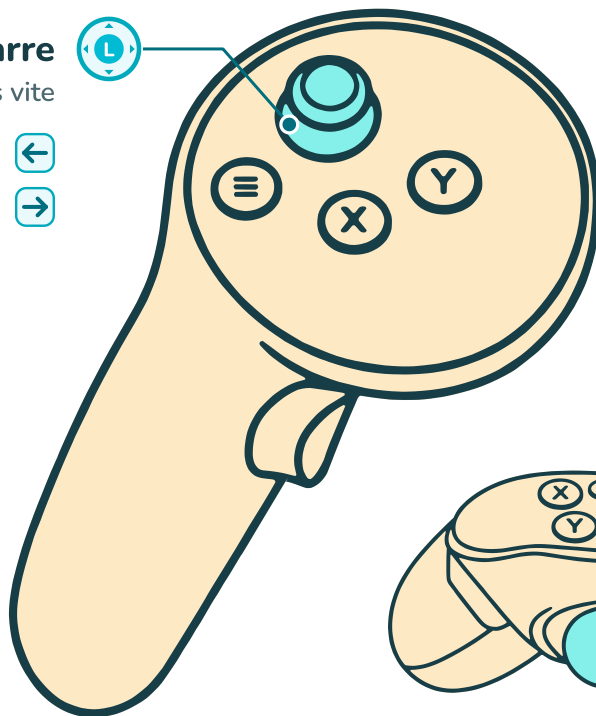

C'est une mesure : rien ne se règle pendant la série. Le kiné n'utilise que la gâchette (en bas).




Valider

L'essai en cours

DANS TOUS LES EXERCICES

Gâchette droite

Maintenir 2 s : fin de l'exercice

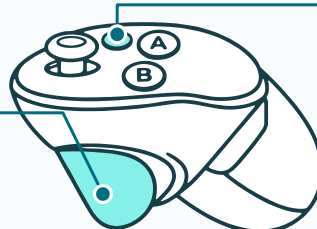

Bouton Meta

Maintenir 2 s : recentrer la vue