



AVD — stabilizzazione e riorientamento

 Tasto usato durante l'esercizio
 Controller da dare al paziente


CONTROLLER SINISTRO

 DA DARE AL PAZIENTE

Indicare l'apertura
della C

Su / giù 

Sinistra / destra 

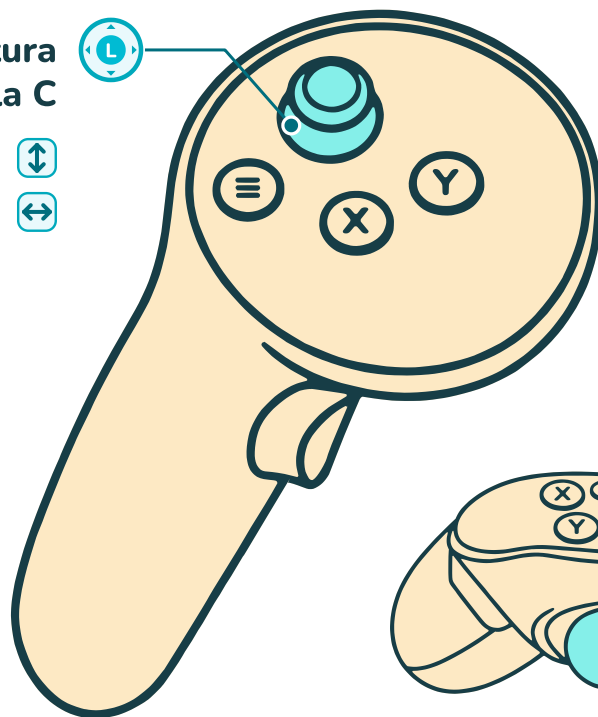


CONTROLLER DESTRO

 LO TIENE IL TERAPISTA

 **B** Ridurre la velocità

 **A** Aumentare la velocità

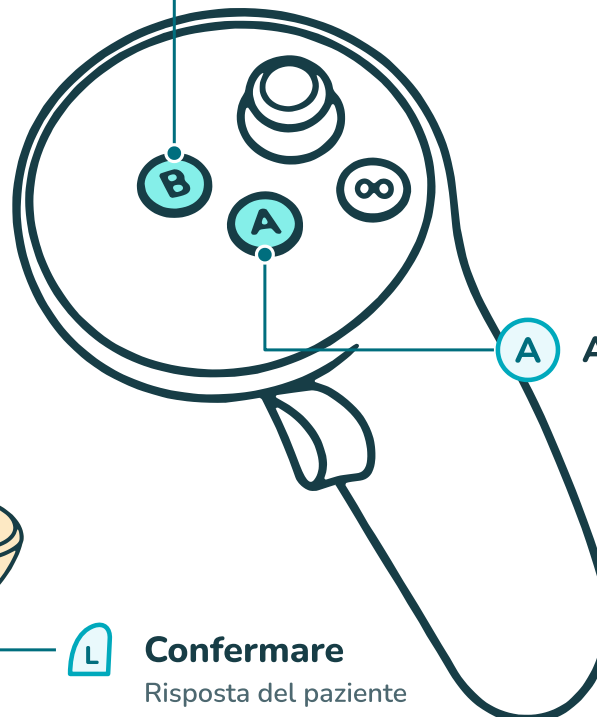

 **L** Confermare
Risposta del paziente

IN TUTTI GLI ESERCIZI

Grilletto destro

Pressione breve: pausa

Tenere premuto 2 s: fine dell'esercizio



 **Tasto Meta**
Tenere premuto 2 s: ricentrare la vista