




Optocinetica

 Tasto usato durante l'esercizio

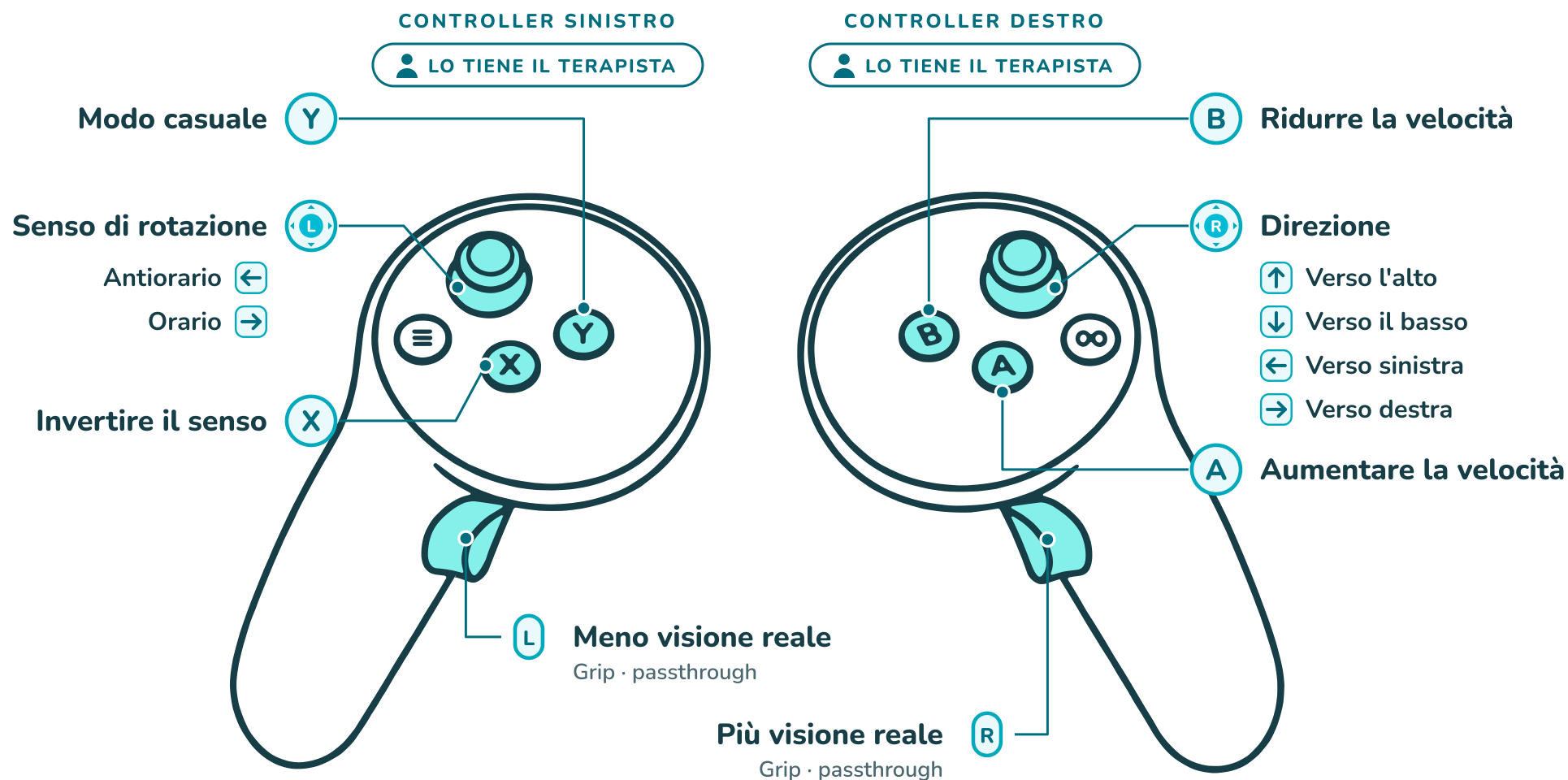


IN TUTTI GLI ESERCIZI

Grilletto destro

Pressione breve: pausa

Tenere premuto 2 s: fine dell'esercizio



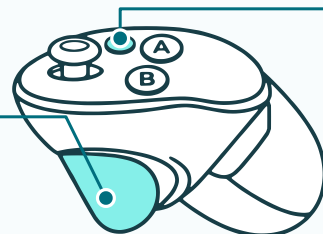

Tasto Meta

Tenere premuto 2 s: ricentrare la vista




Traslazione

 Tasto usato durante l'esercizio


CONTROLLER SINISTRO

 LO TIENE IL TERAPISTA

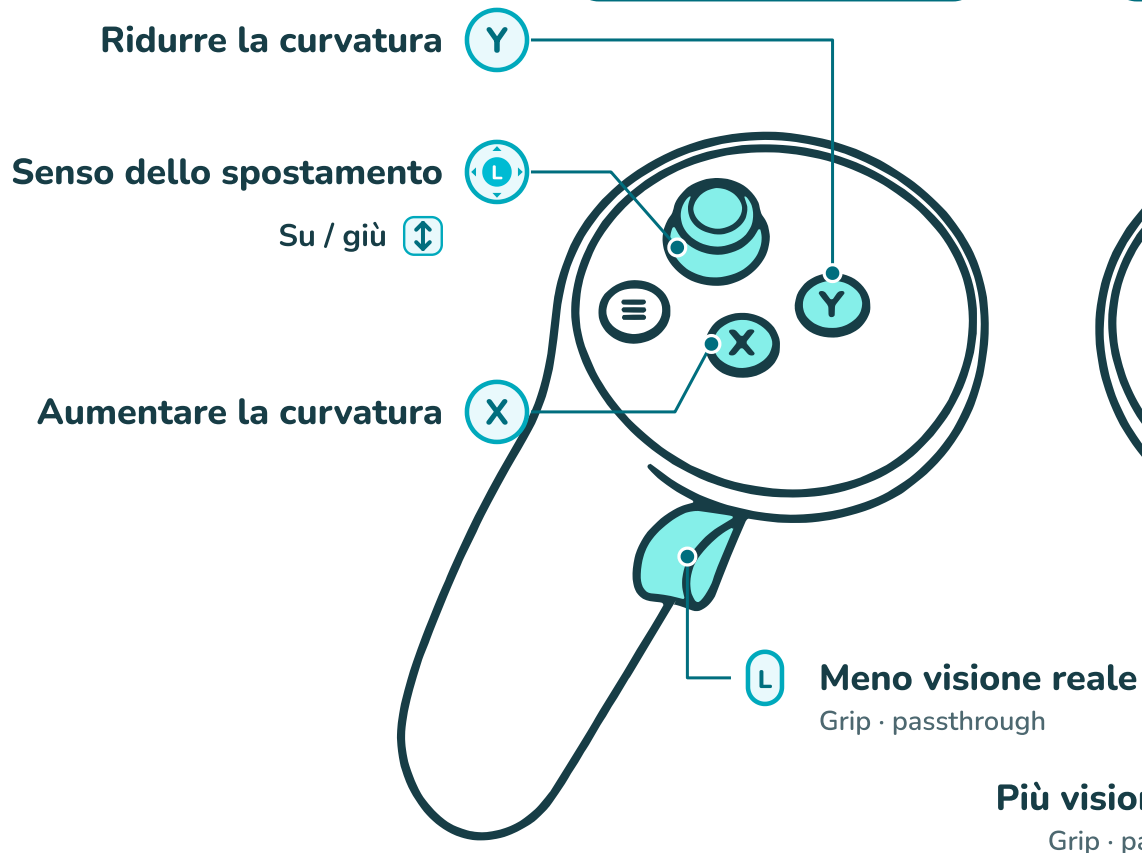


CONTROLLER DESTRO

 LO TIENE IL TERAPISTA

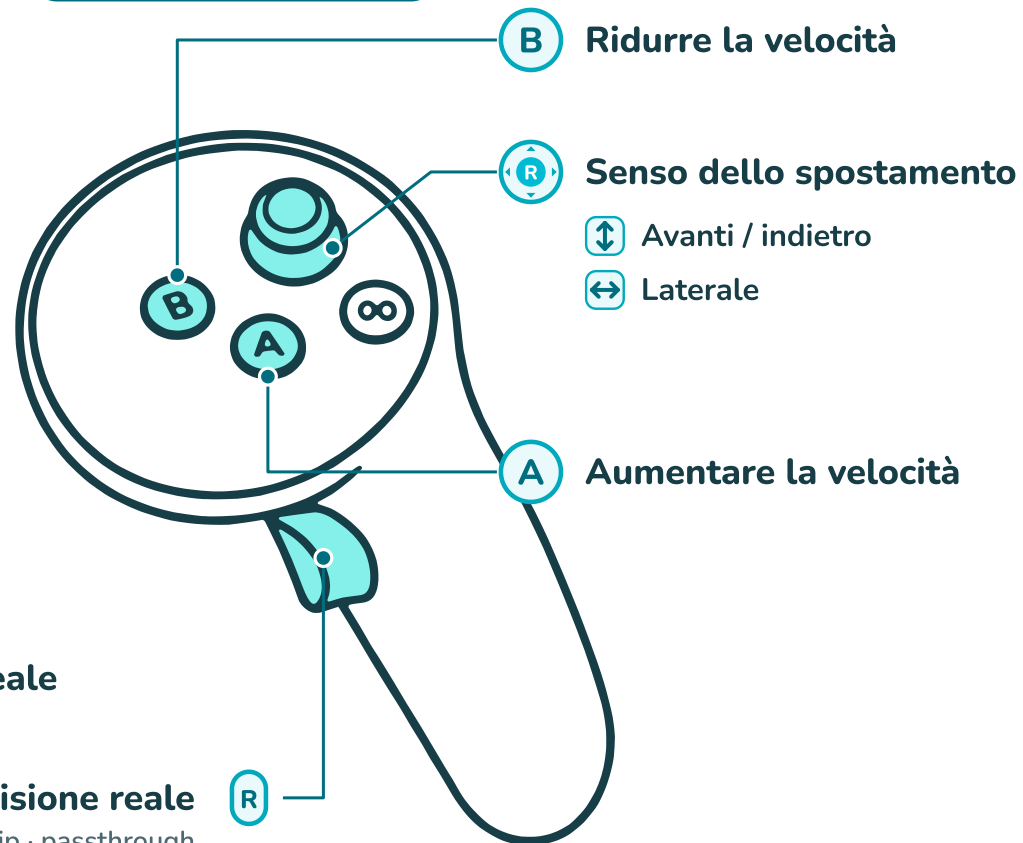

IN TUTTI GLI ESERCIZI

Grilletto destro
Pressione breve: pausa
Tenere premuto 2 s: fine dell'esercizio

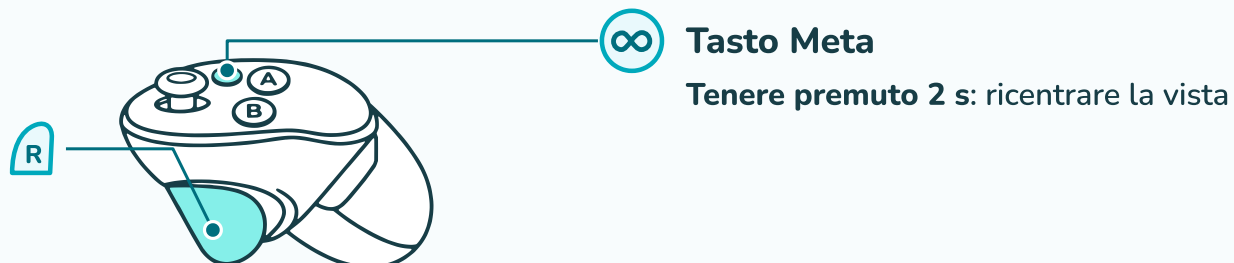



AVD — stabilizzazione e riorientamento

 Tasto usato durante l'esercizio
 Controller da dare al paziente


CONTROLLER SINISTRO

 DA DARE AL PAZIENTE

Indicare l'apertura
della C

Su / giù 

Sinistra / destra 

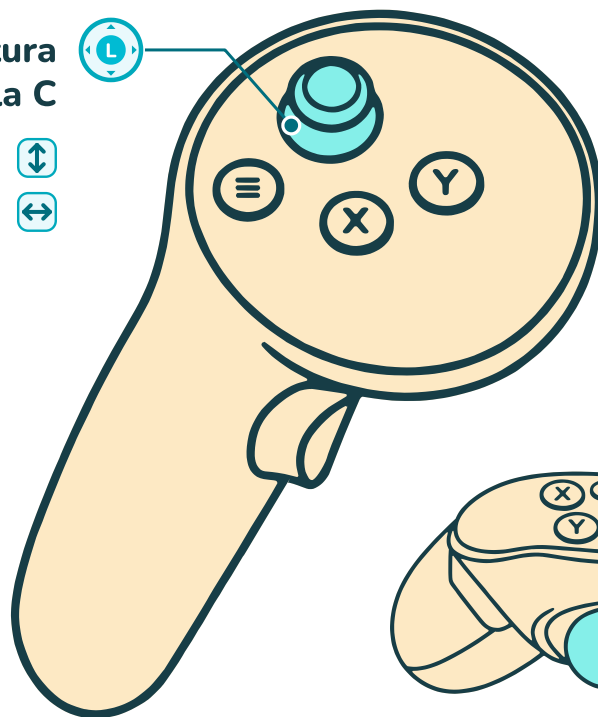


CONTROLLER DESTRO

 LO TIENE IL TERAPISTA

 **B** Ridurre la velocità

 **A** Aumentare la velocità

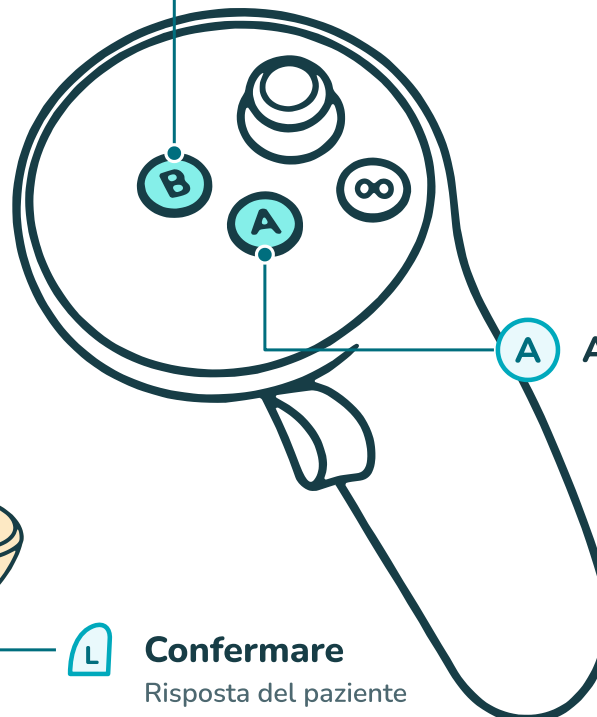

 **L** Confermare
Risposta del paziente

IN TUTTI GLI ESERCIZI

Grilletto destro

Pressione breve: pausa

Tenere premuto 2 s: fine dell'esercizio




 **Tasto Meta**
Tenere premuto 2 s: ricentrare la vista



Bersaglio

 Tasto usato durante l'esercizio

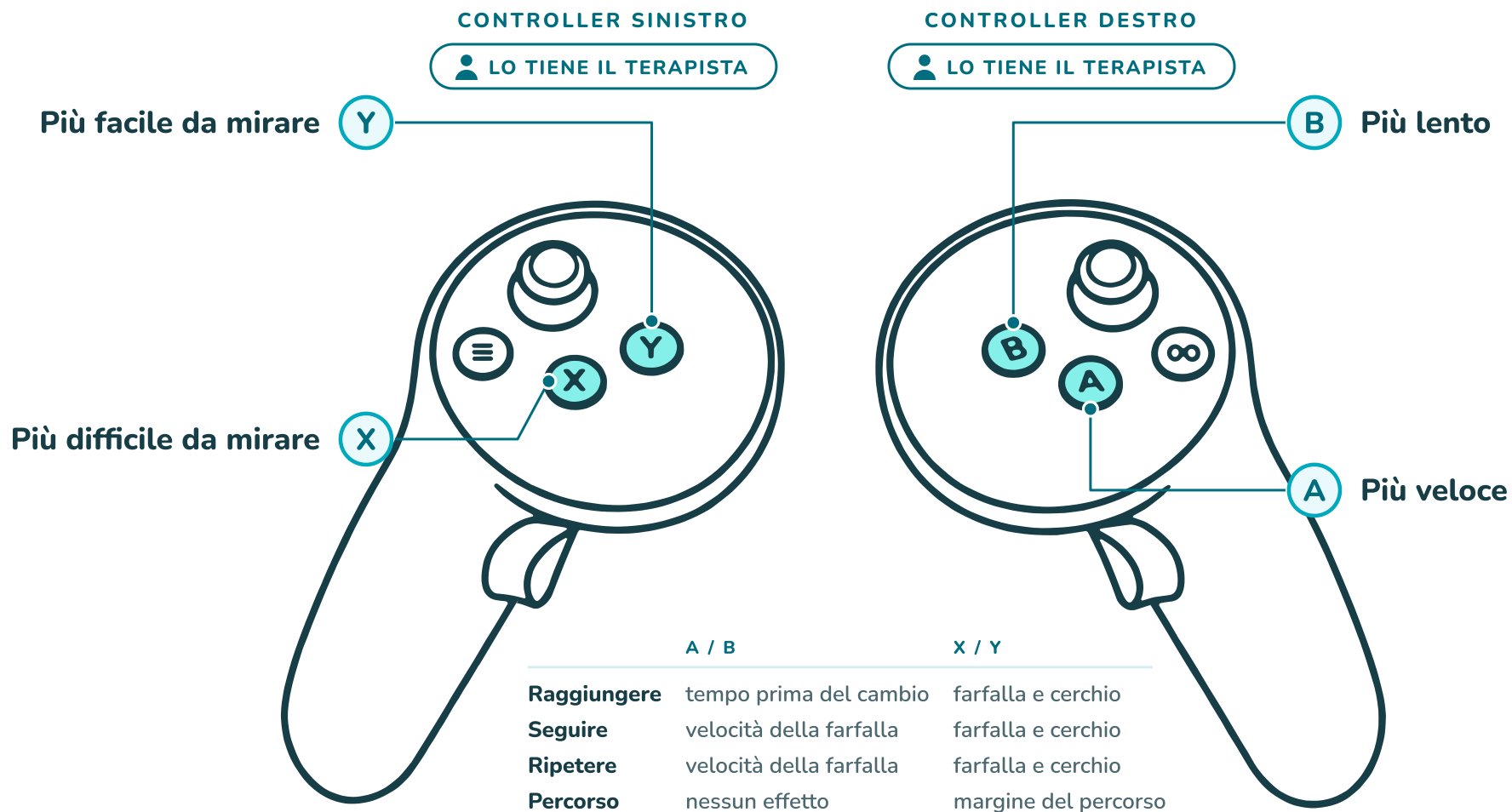


IN TUTTI GLI ESERCIZI

Grilletto destro

Pressione breve: pausa

Tenere premuto 2 s: fine dell'esercizio

 R

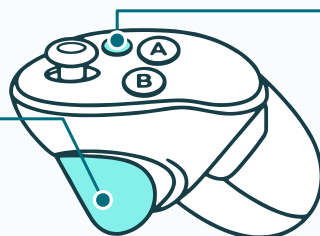

Tasto Meta

Tenere premuto 2 s: ricentrare la vista



Verticale visiva (VVS)

● Tasto usato durante l'esercizio
■ Controller da dare al paziente

CONTROLLER SINISTRO

■ DA DARE AL PAZIENTE


CONTROLLER DESTRO

● LO TIENE IL TERAPISTA

Ruotare la barra
Tenere premuto: più veloce

Antiorario ←

Orario →

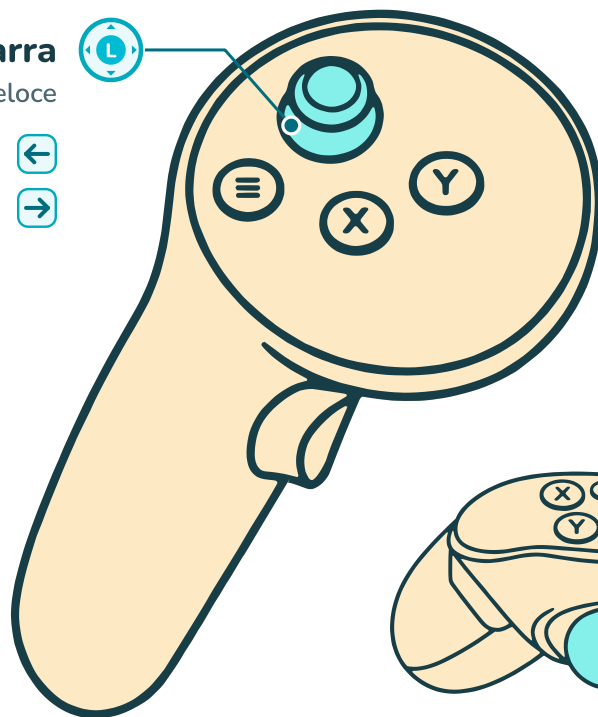

È una misura: non si regola nulla durante la serie. Il terapeuta usa solo il grilletto (in basso).



Confermare
La prova in corso

IN TUTTI GLI ESERCIZI

Grilletto destro
Tenere premuto 2 s: fine dell'esercizio



Tasto Meta
Tenere premuto 2 s: ricentrare la vista