



AVD — estabilização e reorientação

 Botão usado durante o exercício
 Comando a entregar ao paciente


COMANDO ESQUERDO

 ENTREGAR AO PACIENTE

Indicar a abertura
do C

Para cima / baixo 

Esquerda / direita 

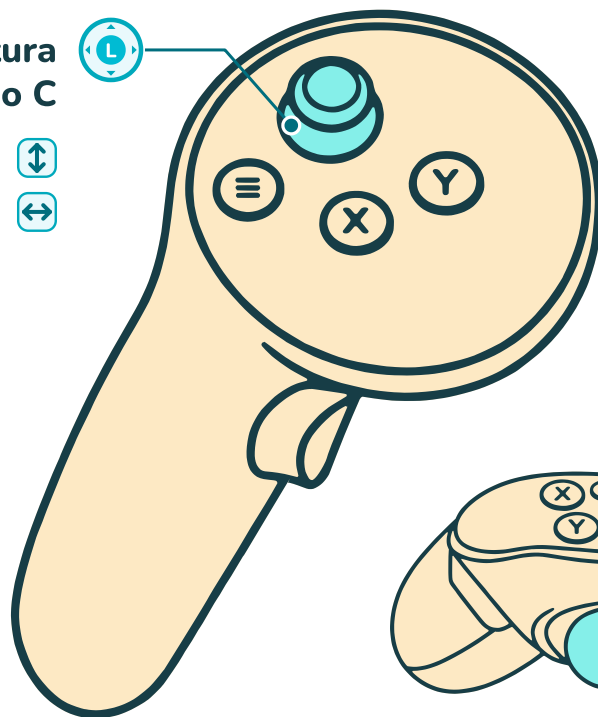


COMANDO DIREITO

 FICA COM O TERAPEUTA

 **B** Diminuir a velocidade

 **A** Aumentar a velocidade

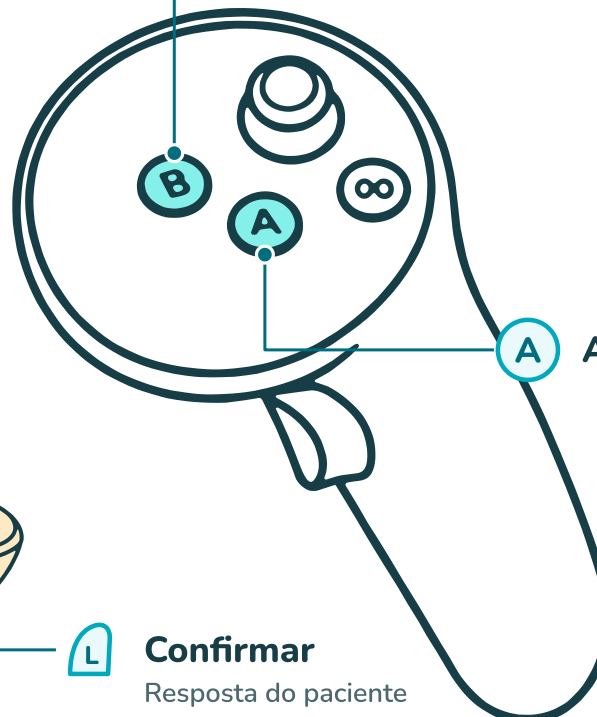

 **L** Confirmar
Resposta do paciente

EM TODOS OS EXERCÍCIOS

Gatilho direito

Pressão curta: pausa

Manter premido 2 s: fim do exercício



 **Botão Meta**
Manter premido 2 s: recentrar a vista