




Optocinética

● Botão usado durante o exercício

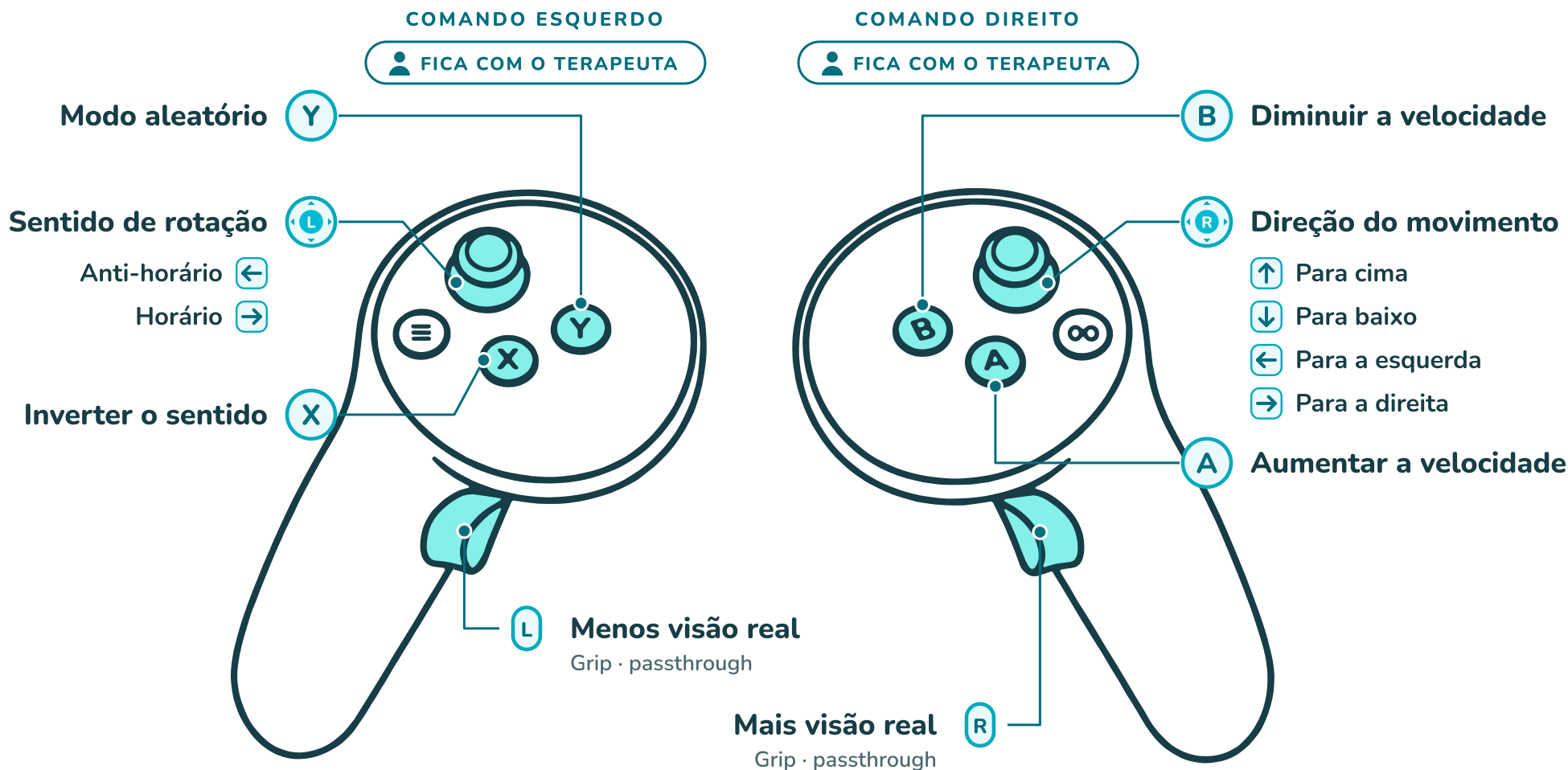

EM TODOS OS EXERCÍCIOS

Gatilho direito

Pressão curta: pausa

Manter premido 2 s: fim do exercício




Botão Meta

Manter premido 2 s: recentrar a vista




Translação

● Botão usado durante o exercício

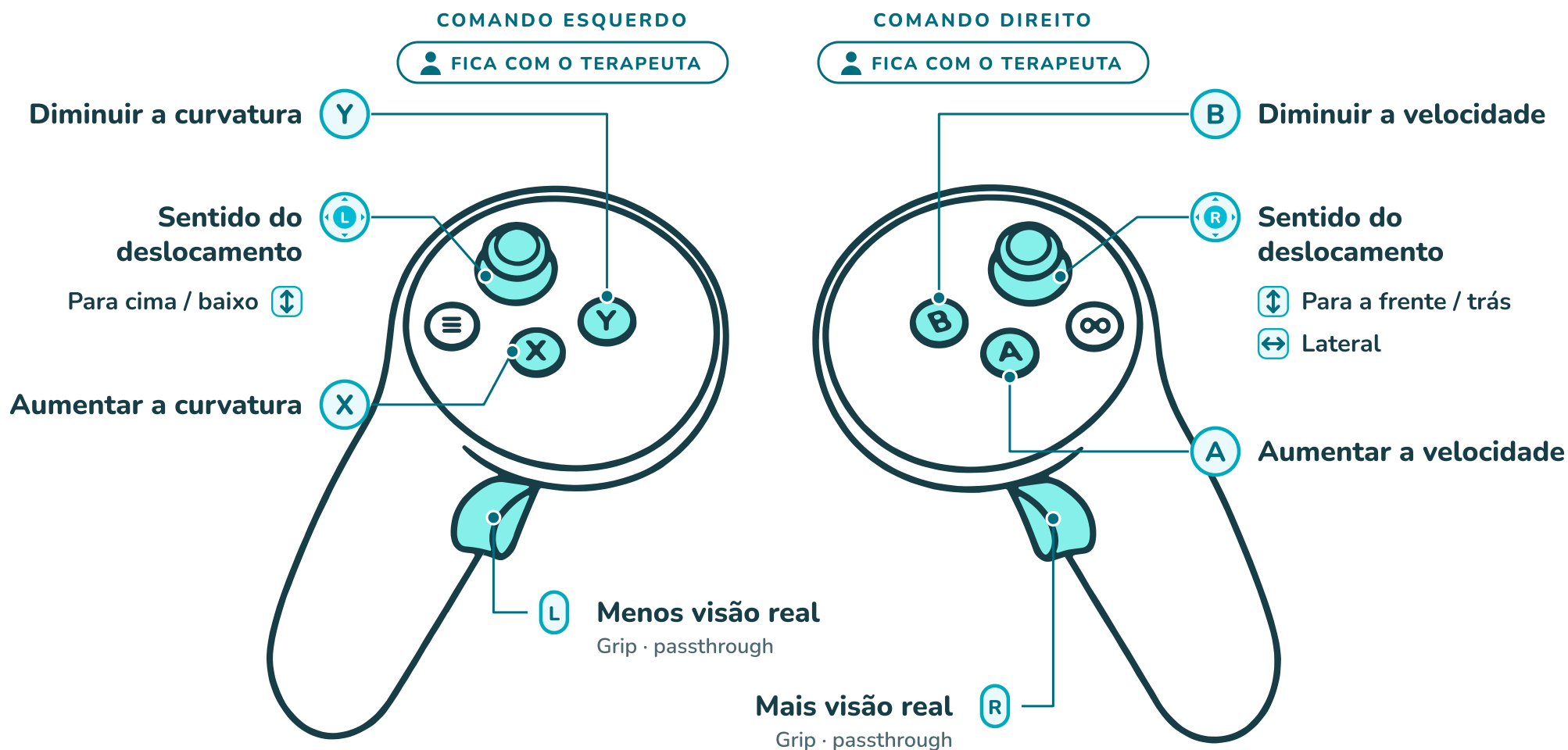

EM TODOS OS EXERCÍCIOS

Gatilho direito
Pressão curta: pausa
Manter premido 2 s: fim do exercício

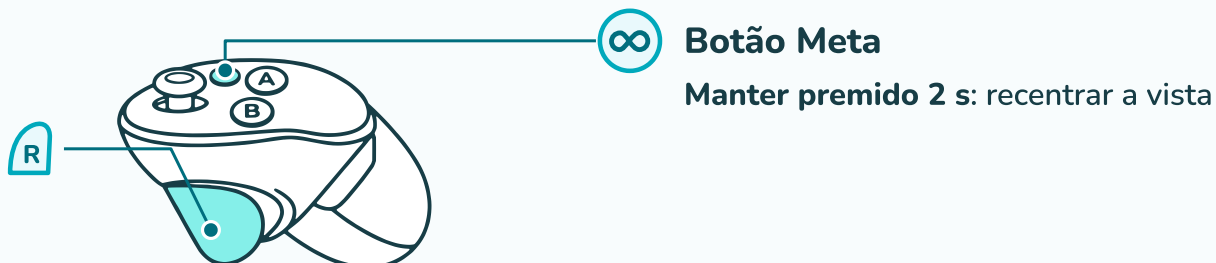



AVD — estabilização e reorientação


● Botão usado durante o exercício
■ Comando a entregar ao paciente

COMANDO ESQUERDO

ENTREGAR AO PACIENTE

Indicar a abertura
do C

Para cima / baixo
Esquerda / direita

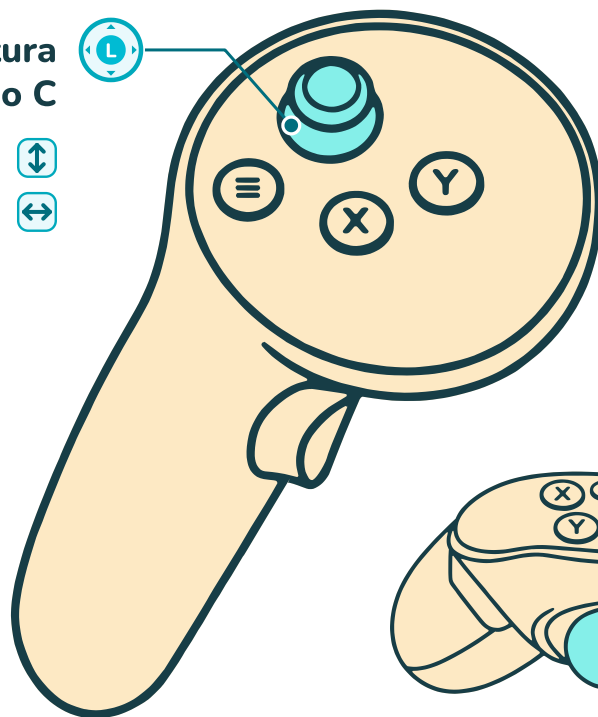


COMANDO DIREITO

FICA COM O TERAPEUTA

B Diminuir a velocidade

A Aumentar a velocidade

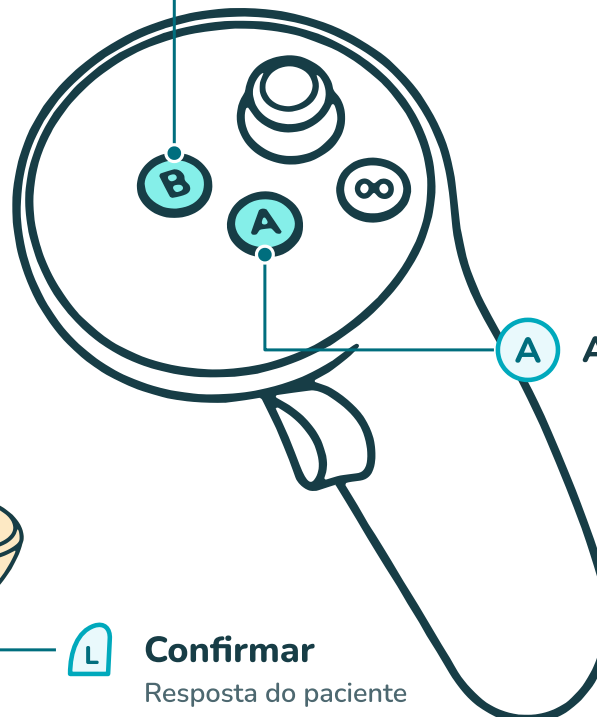

L Confirmar
Resposta do paciente

EM TODOS OS EXERCÍCIOS


Gatilho direito

Pressão curta: pausa

Manter premido 2 s: fim do exercício



∞ Botão Meta
Manter premido 2 s: recentrar a vista

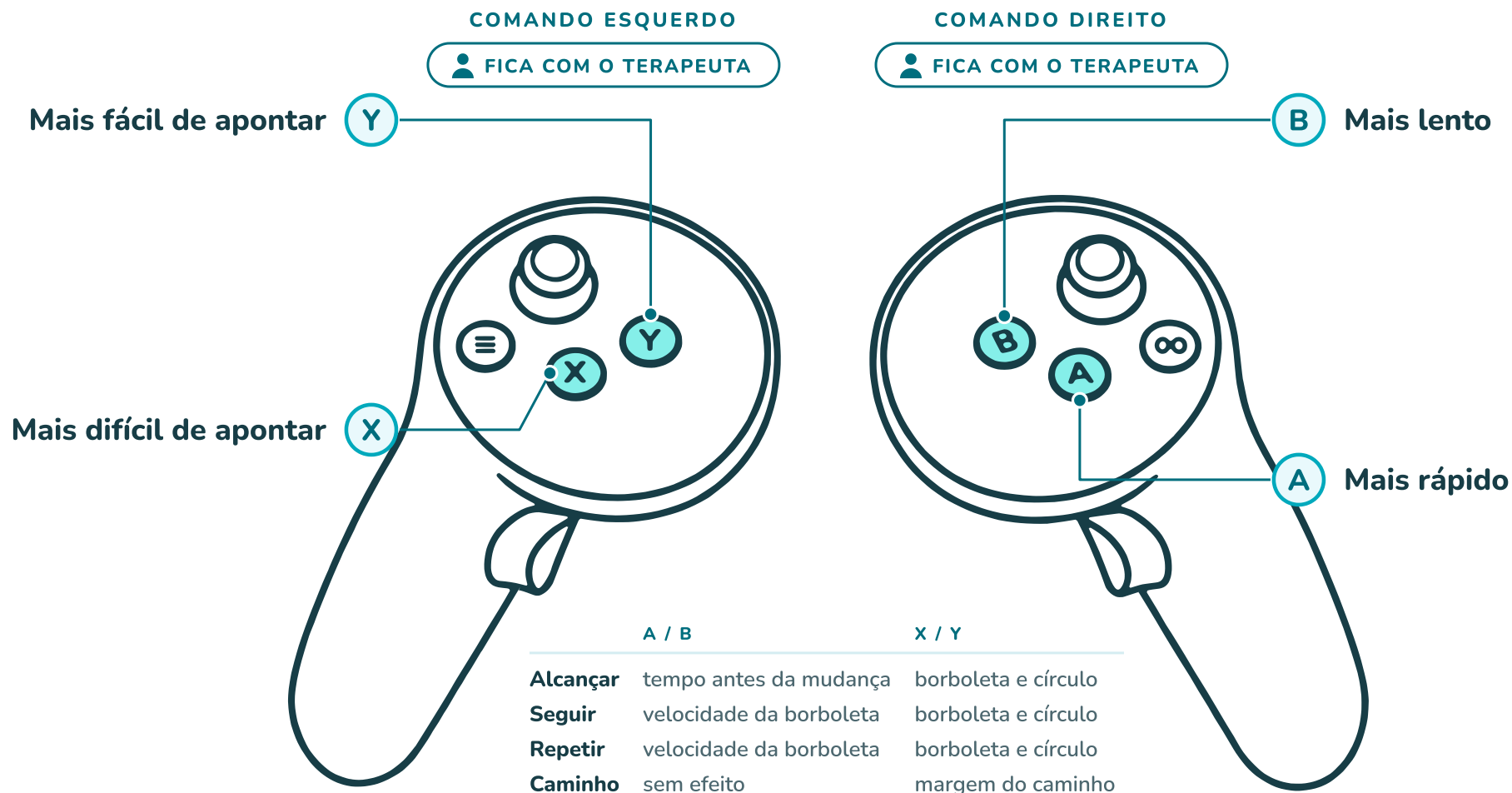

EM TODOS OS EXERCÍCIOS

Gatilho direito

Pressão curta: pausa

Manter premido 2 s: fim do exercício



Botão Meta

Manter premido 2 s: recentrar a vista



Vertical visual (VVS)

 Botão usado durante o exercício
 Comando a entregar ao paciente

COMANDO ESQUERDO

 ENTREGAR AO PACIENTE


COMANDO DIREITO

 FICA COM O TERAPEUTA

Rodar a barra
Manter premido: mais rápido

Anti-horário 

Horário 

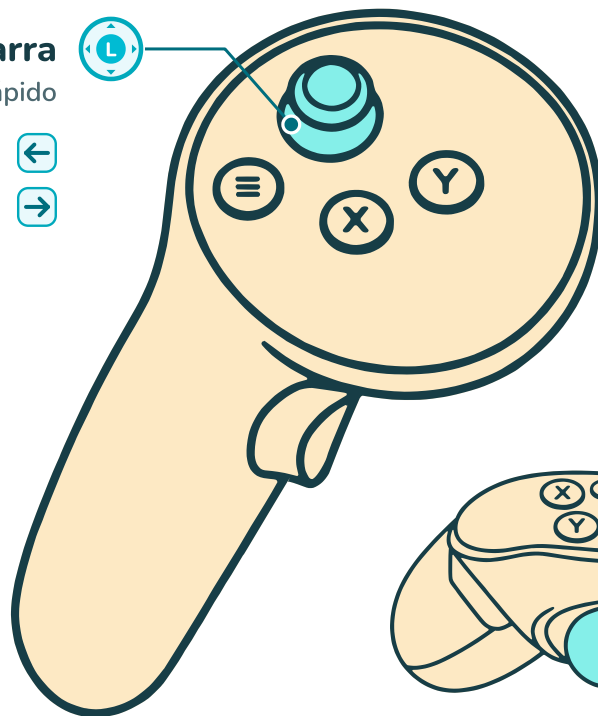

É uma medição: não se regula nada durante a série. O terapeuta só usa o gatilho (em baixo).

 **Confirmar**
O ensaio em curso

EM TODOS OS EXERCÍCIOS

Gatilho direito
Manter premido 2 s: fim do exercício



 **Botão Meta**
Manter premido 2 s: recentrar a vista